

WORDT DE SCHWEISSKILLER VERGOED DOOR DE ZORGVERZEKERING?

Helaas wordt de SchweißKiller (nog) niet standaard vergoed. Wanneer u overweegt over te gaan tot de aanschaf van de SchweißKiller, adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekering voor advies op maat.

WANNEER MAG IK DE SCHWEISSKILLER NIET GEBRUIKEN?

Gebruik van de SchweißKiller wordt afgeraden indien u:

- » een pacemaker heeft
- » een geïmplanteerde hartdefibrillator heeft
- » zwanger bent
- » epilepsie heeft
- » een metalen- of metaalhoudend spiraaltje of pessarium heeft
- » metalen implantaten in het gebied van de elektrische stroom heeft
- » beschadigingen aan de huid of verwondingen heeft die te groot zijn om deze met vaseline te kunnen afdekken.
- » een sterke teruggang in het gevoel aan handen en voeten heeft (bijv. polyneuropathie)
- » jonger dan 5 jaar bent

LEVEROMVANG

| aantal | omschrijving | artikelnummer |
|--------|--|---------------|
| 1 | SchweißKiller | 462040 |
| 1 | Oplader P60-8 | 450970-008 |
| 1 | Kabel Type 5.19 (blauw) | 106355 |
| 1 | Nederlandstalige gebruiksaanwijzing | 451600-0211 |
| 1 | Kunststofkoffer | 450980-0030 |
| 2 | Spons elektroden 50 x 70 mm | 462042 |
| 2 | Oppervlakte elektroden 120 mm x 220 mm | 462083 |
| 2 | Drukknoop-Adapters | 4510901 |



Prijs:
€ 399,-



schwa-medico Nederland BV
Koningin Julianaplein 10
3931 CK WOUDEBERG
Tel. 033 - 465 5064
Email: schwamed@knoware.nl
www.schwa-medico.nl


Art.-Nr. 101665
Stand: 2011-11-25



Last van overmatig zweeten?



PATIENTENINFORMATIE

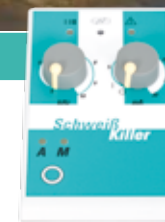

Er is nu een eenvoudige en doeltreffende oplossing om van zweetvoeten en/of zweethanden af te komen.

Lees hier over de oplossing, ook als u last heeft van okselzweeten!

WAT IS ELEKTROSTIMULATIE?

Elektrostimulatie is een behandeling met elektrische stroom. Dit wordt ook wel iontoforese genoemd. Het is een methode waarbij de handen en voeten worden ondergedompeld in water, waar een continue of pulserende gelijkstroom doorheen wordt geleid.

TOEPASSING

Het is vooral geschikt voor handen en voeten, maar ook voor oksels. In dat geval wordt gebruik gemaakt van natte sponsjes om de stroom te appliceren.

De behandeling met elektrostimulatie is ongevaarlijk.

In de praktijk zijn er twee soorten apparaten te onderscheiden: met continue stroom of met een pulserende stroom. Een apparaat met pulserende stroom is een recente ontwikkeling. Het voordeel van pulserende stroom is dat de huid niet geïrriteerd wordt, hetgeen bij een continue stroom wel het geval kan zijn.

IS DE THERAPIE NIEUW?

Nee, de therapie wordt al jaren toegepast met name in fysiotherapiepraktijken. De resultaten van deze therapie worden wetenschappelijk bevestigd. De Deutsche Dermatologische Gesellschaft beveelt

deze therapie als eerste aan bij de behandeling van overmatig zweten.



voorbereiding



waterbadelektroden



sponselektroden

HOE PAS IK DEZE THERAPIE TOE?

U kunt deze therapie thuis toepassen met de SchweißKiller van schwa-medico Nederland BV. Als u de hardschalen koffer opent en de SchweißKiller eruit haalt, kunt u de beschermende kussens uit de koffer verwijderen. Op deze manier ontstaan 2 vloeistofbakjes. Vervolgens kunt u deze vullen met ongeveer 1 liter normaal kraanwater (per bakje). U verbindt de speciale elektroden met de aansluitkabel en vervolgens legt u deze elektroden in het water. Vervolgens zet u uw handen of voeten erin en de behandeling kan beginnen. De behandeling duurt 15 minuten en moet 3 keer per week worden uitgevoerd gedurende 4 weken. Daarna kan worden overgegaan op een minder frequente behandeling, bijvoorbeeld eenmaal per week of per maand. Dit is individueel sterk verschillend.

Met de meegeleverde oplader kunt u de accu van de SchweißKiller net als een mobiele telefoon opladen.