

Reinigungs- und Pflegehinweise

- » Lassen Sie die STIMEX® Stimulationssocken nach der Therapie und nach dem Waschen lufttrocknen.
- » Waschen Sie die STIMEX® Stimulationssocken bitte separat, bei maximal 30 °C, per Handwäsche. Falls nötig, benutzen Sie zur Reinigung ein flüssiges Feinwaschmittel und waschen Sie die STIMEX® Stimulationssocken anschließend mit klarem Leitungswasser aus.
- » Wringen Sie die STIMEX® Stimulationssocken nicht aus!

Material

STIMEX® Stimulationssocken bestehen aus Polyester, Elastan, Polyurethan, mit eingewebten Edelstahlfäden.

Angaben der verwendbaren / zugelassenen Elektrostimulationsgeräte

Die STIMEX® Stimulationssocken können mit allen von Pierenkemper produzierten Elektrostimulationsgeräten verwendet werden.

Cleaning and care

- » Allow the STIMEX® stimulation socks to dry in the air after therapy and after washing.
- » Please wash the STIMEX® stimulation socks separately, at maximum 30 °C, hand wash only. If necessary, use a liquid mild detergent and then rinse the STIMEX® stimulation socks with clear tap water.
- » Do not wring out the STIMEX® stimulation socks!

Material

STIMEX® stimulation socks are made from Polyester, Elastane, Polyurethane, with interwoven stainless steel threads.

Data on the electrical stimulation devices used / approved

The STIMEX® stimulation socks can be used with all electrical stimulation devices manufactured by Pierenkemper.

STIMULATIONS SOCKEN

STIMULATION SOCKS

CHAUSSETTES DE STIMULATION

STIMULATIESOKKEN



Art.-Nr. Art. No. Réf. Art.-Nr.	Größe Size Taille Grootte
107023	M (38-41)
107024	L (42-45)

**Anwendungshinweise**

Bitte lesen Sie vor Gebrauch der STIMEX® Stimulationssocken die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und orientieren Sie sich an den Bildzeichen auf der Verpackung der STIMEX® Stimulationssocken. Beachten Sie die Sicherheitshinweise zum Gebrauch des Produktes.



Stecken Sie den Stecker vom Anschlusskabel des Elektrostimulationsgerätes in den beiliegenden Druckknopfadapter und clippen Sie diesen auf den jeweiligen Druckknopf am Bund der STIMEX® Stimulationssocken.



Ziehen Sie beide STIMEX® Stimulationssocken vorsichtig an.



Schalten Sie das Elektrostimulationsgerät ein und erhöhen Sie die Intensität, bis sich ein deutlich spürbares Stromgefühl einstellt. Therapieren Sie nach Vorgabe des verordnenden Arztes.



Verwenden Sie die STIMEX® Stimulationssocken nicht auf verletzter oder erkrankter Hautoberfläche.

Information for use

Before using the STIMEX® stimulation socks, please read the instructions for use carefully and follow the pictographs on the packaging of the STIMEX® stimulation socks. Follow the safety information for use of the product.

Plug the connecting cable plug of the electrical stimulation device into the pushbutton adapter provided and clip this onto the respective pushbutton at the edge of the STIMEX® stimulation socks.

Put on both STIMEX® stimulation socks carefully.

Switch on the electrical stimulation device and increase the intensity until you clearly feel an electrical current. Perform the therapy as prescribed by your physician.

Do not use the STIMEX® stimulation socks on injured or diseased areas of skin.



Pierenkemper GmbH
Am Geiersberg 6 · 35630 Ehringshausen · Deutschland
Tel. +49 6443 8333-175 · Fax +49 6443 8333-169
info@pierenkemper.eu · www.pierenkemper.eu



schwa-medico
MENSCHLICHE MEDIZIN

Vertrieb DEUTSCHLAND
schwa-medico Medizinische Apparate Vertriebsgesellschaft mbH
Wetzlarer Str. 41 - 43 | 35630 Ehringshausen | Tel. 06443 8333-110
Fax 06443 8333-119 | info@schwa-medico.de | schwa-medico.de

Vertrieb ÖSTERREICH
schwa-medico Handelsgesellschaft m.b.H.
Industriezeile 25 | 5280 Braunau | Tel. 07722 66122
Fax 07722 66123 | info@schwa-medico.at | schwa-medico.at



Berühren Sie während der Therapie mit den STIMEX® Stimulationssocken keine metallischen Gegenstände.




Bringen Sie die STIMEX® Stimulationssocken während der Therapie nicht in Kontakt zueinander.



Tragen Sie während der Therapie mit den STIMEX® Stimulationssocken keinen Schmuck wie z. B. Zeherringe oder Fußkettchen.



Waschen Sie die STIMEX® Stimulationssocken bitte separat, bei maximal 30 °C, per Handwäsche. Wringen Sie die STIMEX® Stimulationssocken nicht aus!

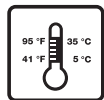

Die STIMEX® Stimulationssocken nicht bei Umgebungstemperaturen unter 5 °C und über 35 °C verwenden.

Do not touch any metallic objects with the STIMEX® stimulation socks during therapy.

Do not bring the STIMEX® stimulation socks into contact with one another during therapy.

Do not wear any metallic jewellery, such as anklets or toe rings, during therapy.

Please wash the STIMEX® stimulation socks separately, at maximum 30 °C, hand wash only. Do not wring out the STIMEX® stimulation socks!

Do not use the STIMEX® stimulation socks at ambient temperatures below 5 °C or above 35 °C

Zweckbestimmung

STIMEX® Stimulationssocken sind zur Anwendung am Menschen bestimmt und ein Medizinprodukt. STIMEX® Stimulationssocken dienen der vollflächigen leitfähigen Verbindung von Elektrostimulationsgerät mit den Füßen eines Patienten, um das Gerät seiner Zweckbestimmung entsprechend anzuwenden. Die STIMEX® Stimulationssocken dienen der Zufuhr von elektrischer Energie. Sie sind ausschließlich auf unverletzter Hautoberfläche zu verwenden. Sie sind zur Anwendung am Menschen bestimmt. Der Einsatzbereich wird durch das verwendete Elektrostimulationsgerät bestimmt.

Kontraindikationen

- » Wunden und Hauterkrankungen im Fußbereich
- » Unverträglichkeit gegenüber den verwendeten Sockenmaterialien

Bitte beachten Sie die zusätzlich die angegebenen Kontraindikationen des verwendeten Elektrostimulationsgerätes.

Intended use

STIMEX® stimulation socks are a medical product intended for use on humans. STIMEX® stimulation socks serve to form a full-area conductive connection between the electrical stimulation device and a patient's feet, in order to use the device as intended. The STIMEX® stimulation socks serve for supplying electrical energy. They may only be used on uninjured skin surfaces. They are intended for application on humans. The area of application is determined by the electrical stimulation device used.

Contraindications

- » Wounds and skin diseases in the foot area
- » Incompatibility with the sock materials used

Please also observe the contraindications indicated for the electrical stimulation device used.

Sicherheitshinweise

- » Eine Überdehnung des Bundes kann zum Nahtausrisse an der innenseitigen Isolierung des Druckknopfes führen! Dadurch kann es zum direkten Hautkontakt mit dem Druckknopf kommen, was Hautschäden zur Folge haben kann. Bitte vergewissern Sie sich deshalb vor jeder Verwendung des Produktes, dass die Isolierung intakt ist.
- » Tragen Sie während der Therapie keinen metallischen Schmuck wie z. B. Fußkettchen oder Zeherringe.
- » Bei unzureichendem Stromgefühl bitte die Füße vor der Verwendung der STIMEX® Stimulationssocken mit Leitungswasser anfeuchten.
- » Vor dem Entfernen der STIMEX® Stimulationssocken immer das Elektrostimulationsgerät ausschalten.
- » STIMEX® Stimulationssocken können Hautirritationen verursachen durch eine Unverträglichkeit oder Allergie gegenüber den verwendeten Sockenmaterialien. Bei Auftreten von Hautirritationen ist vor einer weiteren Anwendung ärztlicher Rat einzuholen.
- » Um eventuelle Hautirritationen zu vermeiden, sollten die STIMEX® Stimulationssocken nur so lange wie für die Therapie nötig getragen werden.
- » Die STIMEX® Stimulationssocken sollten aus hygienischen Gründen nur von einer Person benutzt werden.

Anwendung

- » Stecken Sie den Stecker vom Anschlusskabel des Elektrostimulationsgerätes in den beiliegenden Druckknopfadapter und clippen Sie diesen auf den jeweiligen Druckknopf am Bund der STIMEX® Stimulationssocken.
- » Befeuchten Sie Ihre beiden Füße mit Leitungswasser.
- » Ziehen Sie beide STIMEX® Stimulationssocken vorsichtig an. Beachten Sie die Sicherheitshinweise zum Gebrauch des Produktes.
- » Schalten Sie das Elektrostimulationsgerät ein und erhöhen Sie die Intensität, bis sich ein deutlich spürbares Stromgefühl einstellt. Therapieren Sie nach Vorgabe des verordnenden Arztes.
- » Schalten Sie vor dem Entfernen der STIMEX® Stimulationssocken immer zuerst das Elektrostimulationsgerät aus.

Safety information

- » Overextending the edge can cause the seam to tear on the inside insulation of the pushbutton! This can lead to direct contact with the pushbutton, which can result in damage to the skin. Please therefore make sure that the insulation is intact each time before using the product.
- » Do not wear any metallic jewellery, such as anklets or toe rings, during therapy.
- » If you do not feel enough electrical current, please moisten your feet with tap water before using the STIMEX® stimulation socks.
- » Always switch off the electrical stimulation device before removing the STIMEX® stimulation socks.
- » STIMEX® stimulation socks can cause skin irritations due to an incompatibility or allergy to the sock materials used. If skin irritations occur, seek medical advice before continuing application.
- » To avoid potential skin irritations, the STIMEX® stimulation socks should only be worn as long as necessary for the therapy.
- » The STIMEX® stimulation socks should only be used by one person for hygienic reasons.

Application

- » Plug the connecting cable plug of the electrical stimulation device into the pushbutton adapter provided and clip this onto the respective pushbutton at the edge of the STIMEX® stimulation socks.
- » Moisten both your feet with tap water.
- » Put on both STIMEX® stimulation socks carefully. Follow the safety information for use of the product.
- » Switch on the electrical stimulation device and increase the intensity until you clearly feel an electrical current. Perform the therapy as prescribed by your physician.
- » Always first switch off the electrical stimulation device before removing the STIMEX® stimulation socks.